

TILBEHØR OG LØSDELER




Flocare® bordstativ

Praktisk ramme som passer til Flocare® Infinity™ pumpe og Nutricias sondeernæring eller Flocare® reservoar-beholder.



Flocare® 5 Steps Kobling

Denne 5-trinns overgangskoblingen muliggjør kobling, fra ernæringssett eller enterale sprøyter med ENFit™-kobling, til sonder/kateter med en ENLock eller Luer-fri female kobling. Kan også brukes i unntakstilfeller hvor ENFit™ til ENLock-adapteren (som sitter på overgangssettet) ikke passer godt nok. Erstatter tidligere 5-trinnskobling.

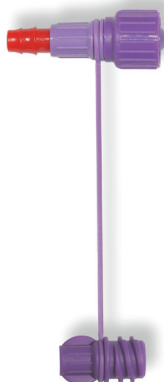

Flocare® Female Kobling

Flocare® Female kobling plasseres i mellomstykket til PEG/Knapp som ikke har ENFit™, for å sikre kompatibilitet med foregående standard. Lekkasje problemer kan unngås ved bruk av Female-kobling, som en erstatningsovergang, der Male-kobling ikke sitter godt nok fast.



Flocare® Bolus Adapter Cross Spike

Flocare® bolus adapter har ENFit kobling, og brukes til å åpne sondeernæringsposer på en hygienisk måte, når sondeernæring skal gis med sprøyte. Bolus adapteren skal skiftes minimum hver 24. time. Sondeernæring med tilkoblet bolus adapter bør oppbevares i kjøleskap i maksimum 24 timer.



Medisinport Støvhette ENFit

Medisinport Støvhette ENFit, brukes til å skru på medisinport etter denne har vært i bruk. Ved at man holder systemet lukket hindrer man bakterievekst. Kan også brukes for å stenge Flocare Nasogastriske sonde. Engangsbruk. Medisinport Støvhette skal skiftes minimum hver 24. time.



Flocare® 1,3 liter Reservoarbeholder - Cross Spike

Flocare® 1,3 liter reservoarbeholder er egnet til administrering av vann eller annen type væske samt sondeløsninger.

Flocare® Reservoarbeholder sammen med pumpesett, er et åpent system.
Hvert reservoar er pakket sterilt og enkeltvis. Engangsbruk.



Flocare® 500 ml Reservoar- beholder - Pack Konnektor

Flocare® 500 ml reservoarbeholder er egnet til administrering av vann eller annen type væske samt sondeløsninger.

Flocare Reservoarbeholder sammen med pumpesett, er et åpent system.
Hvert reservoar er pakket sterilt og enkeltvis. Engangsbruk.



ENFit Sprøyte Støvhette

ENFit Sprøyte Støvhette, skrus på ernæringsprøyter. Dette muliggjør oppbevaring av medisin eller annen væske i sprøyten.

For eksempel ved tilførsel av medisin opptil flere ganger per dag. Engangsbruk. Sprøyte Støvhetten skal skiftes minimum hver 24. time. Sprøyter med innhold skal oppbevares i kjøleskap, og ikke lenger enn 24 timer.



ENFit Sprøyte Strå 150 mm

ENFit Sprøyte Strå 150 mm, brukes ved aspirering, opptrekk, og/ eller tilførsel av medisiner eller annen væske via sprøyte. Skrus på sprøyten, for å forlenge kateterspissen til sprøyten. Engangsbruk.



Flocare forlengelsessett 100cm

Flocare forlengelsessett 100cm, brukes til forlengelse av en nasogastrisk sonde, eller et ernæringssett.
Skal skiftes minimum hver 24. time.

BESTILLINGSINFORMASJON

Tilbehør og løsdeler kan bestilles ved å sende e-post til: ordre.amnno@nutricia.com

Produktnavn	Bestillingsnr.	Varenr.	Antall per salgsenhet
Flocare® bordstativ	35782	812322	1
Flocare® forlengelsessett 100 cm	591393	814071	40
Flocare® Female Konnektor	591396	809372	10
Flocare® Bolus Adapter Cross Spike	589740	854172	30
Flocare® 1,3 liter Reservoarbeholder - Cross Spike	570139	870847	10
Flocare® 500 ml Reservoarbeholder - Pack Konnektor	35746	936429	10
Flocare® 5 Steps Konnektor	589828	890114	30
Medisinport Støvhette ENFit™	589739	860504	2x50
ENFit™ Sprøyte Strå 150 mm	619489	849514	30
ENFit™ Sprøyte Støvhette	619488	963816	30

Mer informasjon om våre Flocare Infinity pumpesett og tilbehør finnes på www.nutricia.no eller kontakt en lokal Nutricia representant.

Nutricias produkter er registrerte næringsmidler til spesielle medisinske formål og skal brukes i samråd med helsepersonell

Nutricia Norge AS | Tlf. +47 23 00 21 00 | E-post nutricia@nutricia.no | www.nutricia.no