

FLOCARE® GRAVITY™ ERNÆRINGSSETT

Ernæringssett for tilkobling av sondeernæring til nasalsonder, PEG-sonder eller til mellomstykker til gastrostomiknapper, når tilførsel skjer uten bruk av pumpe (gravitasjon).

Flocare® Gravity sett er for tilkobling til alle Nutrison sondeernæringer og andre leverandørers sondeernæringer. Flocare® Gravity Universal sett er for tilkobling til både Nutricia og andre leverandørers sondeernæringsemballasjer. Ernæringssettet har ENFit-/ENPluskobling. Den lilla fargen skaper et klart skille fra administrasjonssett til parenteralt bruk. Alle Flocare® Gravity sett er frie for ftalater.



Flocare® Gravity™ sett




Flocare® Gravity Universal pose- og flasksett




Relatert utstyr

Flocare® ENFit™ Medisinport støvhette

Flocare® Gravity™ sett

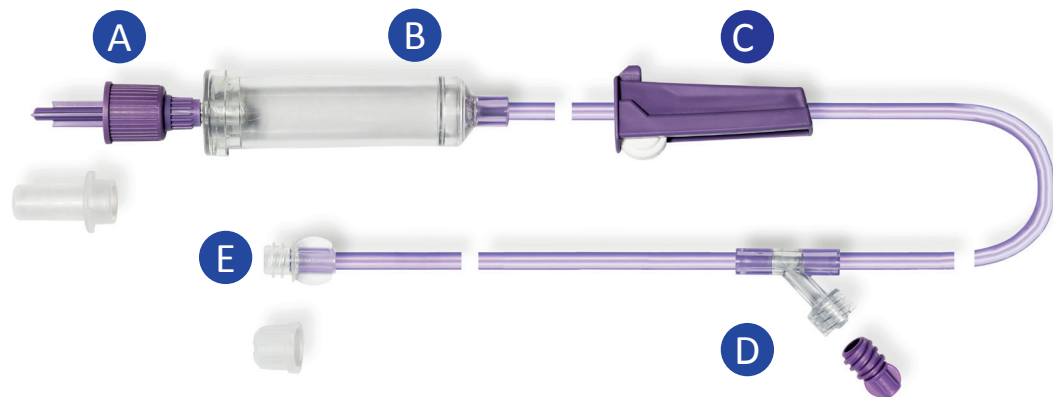

Flocare® Gravity Universal pose- og flaskesett

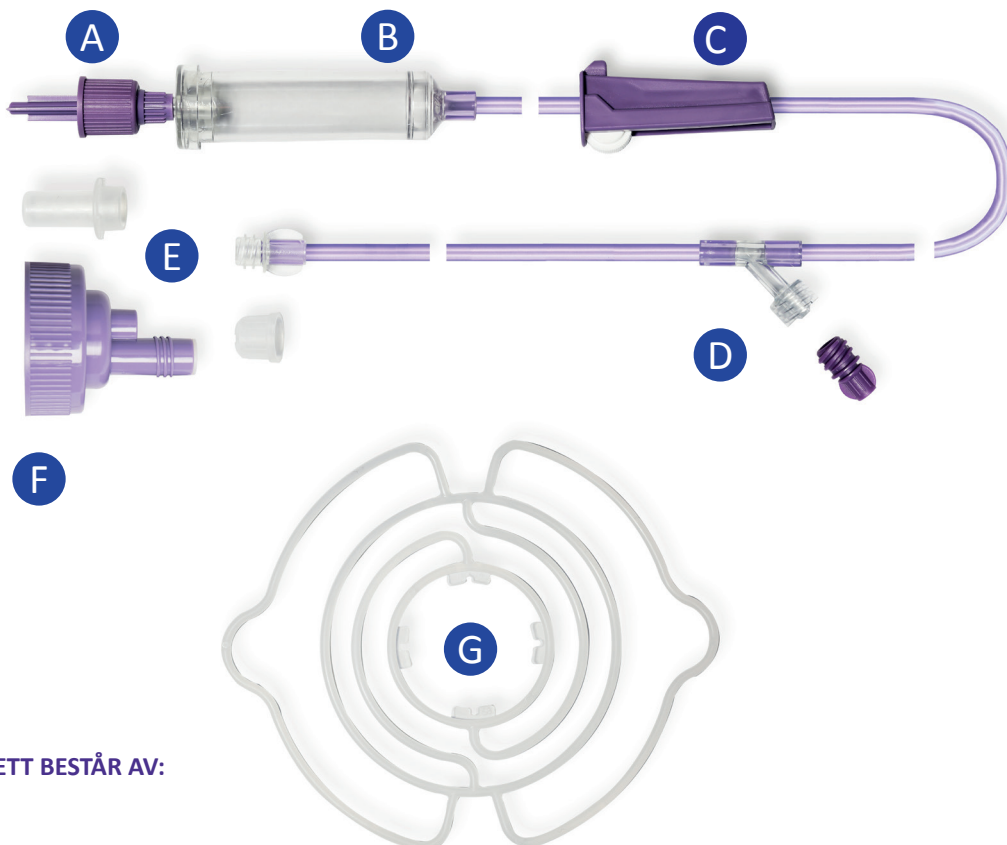

FLOCARE® GRAVITY™ ERNÆRINGSSETT BESTÅR AV:

- A:** Plussformet ENPlus-kobling.
- B:** Dråpekammer
- C:** Rulleklemme
- D:** Y-kobling til for tilførsel av medisin og gjennomskylling (med hette).
- E:** Female ENFit-kobling
- F:** Kobling til glass og tåteflasker (medfølger universalsett)
- G:** Flaskeoppheng (medfølger universalsett)

BESTILLINGSINFORMASJON

Produktnavn	Bestillingsnr.	Varenr.	Salgsenhet
Flocare® Gravity-sett	86460	966082	30 stk.
Flocare® Universal pose- og flaskesett	89755	880440	30 stk.
Relatert utstyr:			
Flocare® ENFit™ Medisinport støvhette	89739	860504	2 x 50 stk.

Varianter

Ernæringssett til bruk sammen med Nutricias og andre leverandørers sondeernæring. Universalsett til bruk sammen med Nutricias og andre leverandørers sondeernæring.

Materiale

PVC godkjent til medisinsk bruk, fri for ftalater,

Emballasje

Enkeltvis sterilt pakket.

Holdbarhet

36 måneder fra produksjonsdato. Holdbarhetsdato fremgår av merking på forpakningen.

Oppbevaring

Oppbevares i romtemperatur.

Brukstid

24 timer.

Mer informasjon om våre Flocare Infinity pumpesett og tilbehør finnes på www.nutricia.no eller kontakt en lokal Nutricia representant.

Nutricias produkter er registrerte næringsmidler til spesielle medisinske formål og skal brukes i samråd med helsepersonell.

Nutricia, % Danone AS | Tlf. +47 23 00 21 00 | E-post nutricia.amnno@danone.com | www.nutricia.no