

# TILBEHØR OG LØSDELER

## Flocare® bordstativ

Praktisk ramme som passer til Flocare® Infinity™ pumpe og Nutricias sondeernæring eller Flocare® reservoar-beholder.




## Flocare® 5 Steps Kobling

Denne 5-trinns overgangskoblingen muliggjør kobling, fra ernæringssett eller enterale sprøyter med ENFit™-kobling, til sonde/kateter med en ENLock eller Luer-fri female kobling. Kan også brukes i unntakstilfeller hvor ENFit™ til ENLock-adapteren (som sitter på overgangssettet) ikke passer godt nok. Erstatte tidligere 5-trinnskobling.



## Flocare® Female Kobling

Flocare® Female kobling plasseres i mellomstykket til PEG/ Knapp som ikke har ENFit™, for å sikre kompatibilitet med foregående standard. Lekkasje-problemer kan unngås ved bruk av Female-kobling, som en erstatingsovergang, der Male-kobling ikke sitter godt nok fast.

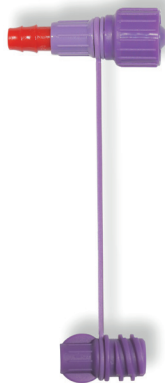

## Flocare® Bolus Adapter Cross Spike

Flocare® bolus adapter har ENFit kobling, og brukes til å åpne sondeernæringsposer på en hygienisk måte, når sondeernæring skal gis med sprøyte. Bolus adapteren skal skiftes minimum hver 24. time. Sondeernæring med tilkoblet bolus adapter bør oppbevares i kjøleskap i maksimum 24 timer.



## Flocare® 1,3 liter

### Reservoarbeholder - Cross Spike

Flocare® 1,3 liter reservoar-beholder er egnet til administrering av vann eller annen type væske samt sondeløsninger. Flocare® Reservoarbeholder sammen med pumpesett, er et åpent system. Hvert reservoar er pakket sterilt og enkeltvis. Engangsbruk.



## Flocare® 500 ml Reservoar-beholder - Pack Konnektor

Flocare® 500 ml reservoar-beholder er egnet til administrering av vann eller annen type væske samt sondeløsninger. Flocare Reservoarbeholder sammen med pumpesett, er et åpent system. Hvert reservoar er pakket sterilt og enkeltvis. Engangsbruk.



## ENFit™ Sprøyte Støvhette

ENFit™ Sprøyte Støvhette, skrues på ernæringsprøyter. Dette muliggjør oppbevaring av medisin eller annen væske i sprøyten. For eksempel ved tilførsel av medisin opptil flere ganger per dag. Engangsbruk. Sprøyte Støvhetten skal skiftes minimum hver 24. time. Sprøyter med innhold skal oppbevares i kjøleskap, og ikke lenger enn 24 timer.




## ENFit™ Sprøyte Strå 150 mm

ENFit™ Sprøyte Strå 150 mm, brukes ved aspirering, opptrekk, og/eller tilførsel av medisiner eller annen væske via sprøyte. Skrues på sprøyten, for å forlenge kateterspissen til sprøyten. Engangsbruk.



## Flocare forlengelsessett 100cm

Flocare forlengelsessett 100cm, brukes til forlengelse av en nasogastrisk sonde, eller et ernæringssett. Skal skiftes minimum hver 24. time.

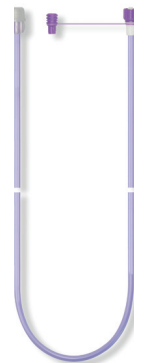

## BESTILLINGSINFORMASJON

Tilbehør og løsdeler kan bestilles ved å sende e-post til: [nutricia.amnno@danone.com](mailto:nutricia.amnno@danone.com)

Produktnavn	Bestillingsnr.	Varenr.	Antall per salgsenhet
Flocare® bordstativ	40361	812322	1
Flocare® forlengelsessett 100 cm	91393	814071	40
Flocare® Female Konnektor	91396	809372	10
Flocare® Bolus Adapter Cross Spike	89740	854172	30
Flocare® 1,3 liter Reservoarbeholder - Cross Spike	70139	870847	10
Flocare® 500 ml Reservoarbeholder - Pack Konnektor	40441	936429	10
Flocare® 5 Steps Konnektor	89828	890114	30
ENFit™ Sprøyte Strå 150 mm	119489	849514	30
ENFit™ Sprøyte Støvhette	119488	963816	30

Mer information om våre Flocare Infinity pumpesett og tilbehør finnes på [www.nutricia.no](http://www.nutricia.no) eller kontakt en lokal Nutricia representant.

Nutricias produkter er registrerte næringsmidler til spesielle medisinske formål og skal brukes i samråd med helsepersonell.