

FLOCARE® INFINITY™ PACK & FLASKESETT UTEN DRYPPKAMMER PACK SET UTEN UTEN DRYPPKAMMER

Enterale ernæringssett for Flocare® Infinity™ enteral ernæringspumpe.

Pumpesettene passer til Flocare® Infinity™-pumpen. Begge settene har en treveiskran og patentert automatisk fristrømsbeskyttelse for pasientens sikkerhet.

Flocare® Infinity™ Pack Set uten dryppkammer er for tilkobling til alle Nutrison sondeløsninger og andre leverandørers sondeernæringer.

Flocare® Infinity™ Pack & Flaskesett uten dryppkammer er beregnet for tilkobling til både Nutricias og andre leverandørers sondeernærings-emballasjer.

Ernæringssettene har ENFit-/ENPlus-kobling. Den lilla fargen skaper et klart skille fra administrasjonssett til parenteralt bruk. Alle Flocare® Infinity™-sett er frie for ftalater. Av miljøhensyn er ernæringssettene dryppfrie.




BESTILLINGSINFORMASJON

Produktnavn	Bestillingsnr.	Varenr.	Salgsenhet
Flocare® Infinity™ Pack set uten dryppkammer	100103	950256	30 stk.
Flocare® Infinity™ Pack & Bottle set uten dryppkammer	188270	987907	30 stk.

FLOCARE® INFINITY™ PUMPESETT:


Flocare® Infinity™ Pack Set uten dryppkammer

Passer til Nutricia sondeernæringsflaske og alle andre sondeernæringspakker på markedet som har en ENPlus-kobling. For mobil bruk. Lengde 2340 mm.

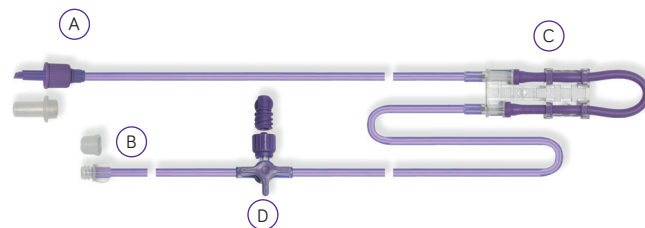

Flocare® Infinity™ Pack & Flaskesett uten dryppkammer

Passer til alle andre sondeernæringspakker på markedet. Til ernæringssettet følger det med en adapter til flaske og flaskeoppheng. Lengde 2340 mm.

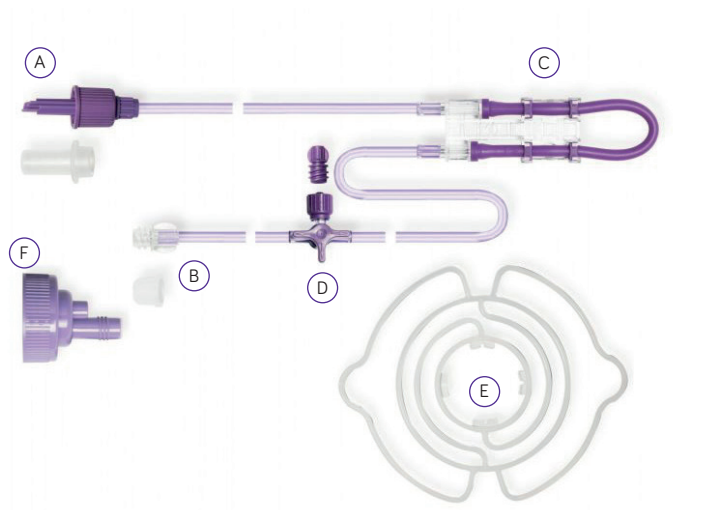

FLOCARE® INFINITY™ PUMPESETT BESTÅR AV:

- A:** ENPlus-kobling til sondeernæring
- B:** ENFit-kobling
- C:** Flocare Infinity pumpekassett
- D:** 3-veis kran (med hette, ENFit) for tilførsel av medisin og/ eller gjennomskylling
- E:** Flaskeoppheng (følger med universal sett)
- F:** Flaske konnektor til glass og tåteflasker (følger med universal sett)

Materiale: PVC godkjent for medisinsk bruk, fri for ftalater.

Emballasje: Enkeltvis sterilt pakket.

Holbarhet: 36 måneder fra produksjonsdato. Holdbarhetsdato merket på forpakning.

Brukstid: 24 timer.

Mer informasjon om våre Flocare Infinity pumpesett og tilbehør finnes på www.nutricia.no eller kontakt en lokal Nutricia representant.

Nutricias produkter er registrerte næringsmidler til spesielle medisinske formål og skal brukes i samråd med helsepersonell.

Nutricia, % Danone AS | Tlf. +47 23 00 21 00 | E-post nutricia.amnno@danone.com | www.nutricia.no